

価格・仕様

ゆったり手すり

形式	重量	価格(税抜価格)	TAISコード
STW-450N	18kg	76,650円(73,000円)	01164-0000015
STW-600N	20kg	84,000円(80,000円)	01164-0000016
STW-450KN	24kg	92,400円(88,000円)	01164-0000011
STS-450KN	19kg	81,900円(78,000円)	01164-0000019
STW-600KN	27kg	99,750円(95,000円)	01164-0000012
STS-600KN	22kg	89,250円(85,000円)	01164-0000020
STW-450SN	26kg	95,550円(91,000円)	01164-0000013
STS-450SN	21kg	85,050円(81,000円)	01164-0000018
STW-600SN	30kg	102,900円(98,000円)	01164-0000014
STS-600SN	25kg	92,400円(88,000円)	01164-0000017

記号の見方 ST ① — ② ③ N (例) STW-450SN…両側手すり、幅45cm、高さ調節式踏み台となります。

①手すりの種類 W-両側/S-片側 ②幅 450-45cm/600-60cm ③踏み台の種類 無記号-踏み台無し/K-固定式/S-高さ調節式


専用固定バー (別売品ですが必ず取り付けて下さい)

形式	長さ	価格(税抜価格)
ST-LN	玄関の幅100~200cmに対応	8,400円(8,000円)

主要部材の材質・塗装

部品名	材質
手すり	スチール(エラストマー被覆)
手すりフレーム	スチール(エポキシ系プライマー塗装+アクリル焼付け塗装)
スライド脚	スチール(エポキシ系プライマー塗装+アクリル焼付け塗装)
底板	スチール(ポリエステル粉体塗装)
アジャスター	ABS樹脂
組付ネジ	クロモリブデン綱(四三酸化鉄皮膜)
踏み台	高さ 固定 スチール(ポリエステル粉体塗装)
	高さ 調整 スチール(ポリエステル粉体塗装)

サイズ

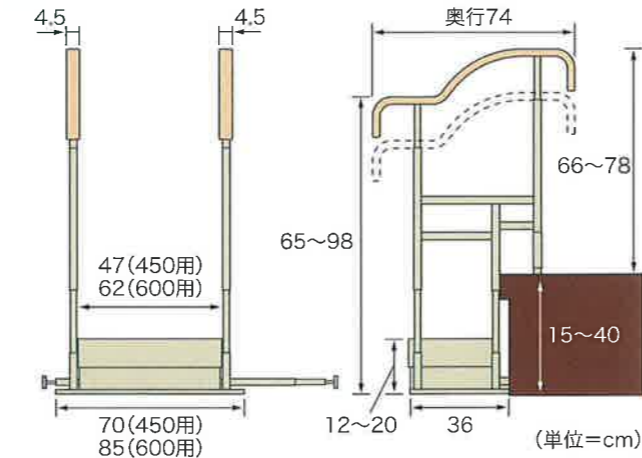

ご注意 『ゆったり手すり』が取り付けできない場所

①玄関が狭く、ゆったり手すりが設置できないところ。	⑥玄関の床が凹凸でゆったり手すりが水平に置けないところ。
②玄関のあがりかまちが床より15cm未満のところ。	⑦玄関のあがりかまちの幅が91cm(STW-450)・90cm(STW-600)より狭いところ。
③玄関のあがりかまちが床より40cm超のところ。	⑧玄関のあがりかまちの幅が2mより広いところ。 ※玄関の上がりかまちの幅が1~2m以外の時は、つっぱり棒の特注品で対応できる場合もありますので、メーカーにお問い合わせ下さい。
④玄関とあがりかまちが両側面の壁と直角でないところ。	⑨玄関の壁の下部(固定バーが当たる所)が斜めになっているところ。
⑤玄関とあがりかまちが曲線になっているところ。	⑩玄関の中央には取り付けできません。

販売店

代理店 株式会社ウェルファン

〒573-0086 大阪府枚方市香里園町13-1  
ホームページ: <http://www.welfan.co.jp>  
TEL.072-835-0591 FAX.072-834-5731

SSK セパレーターシステム工業株式会社

葛城工場(営業本部) / 〒639-2123 奈良県葛城市忍海31-1 営業所 / 東京  
E-mail: [info@s-s-k.co.jp](mailto:info@s-s-k.co.jp) ホームページ: <http://www.s-s-k.co.jp>  
TEL.0745-65-5500(代) FAX.0745-65-5501

レンタル用

玄関用あがりかまち手すり

# ゆったり手すり

独自の固定方式でカンタンに取り付けできます。

新製品

こんな手すりが  
欲しかった!

これなら  
段差があっても  
安心・楽々!!



SSK セパレーターシステム工業株式会社

# ● ゆったり手すりの特長

## 両側手すりで玄関の上り降りも安心・安全です



STEP 1

玄関から降りる時、手すりの上部に水平な部分があるので、身体を支えやすく、最初の一步が楽に出せます。



STEP 2

手すりの中間部分がゆったりとしたカーブなので玄関台に足を置いた時、高齢者や障害者の方もゆったりと身体を移動させることができます。



STEP 3

降りた所にも手すりに水平な部分があるので、身体を前傾させずに安心して靴を履くことができます。

## 高齢者の動作にあった、ゆったり形状の手すり

### ● 玄関から上った時も手すりの水平部が長いので、次の動作に楽に移れます。

#### 今までの代表的な手すりの形状



身体を支えやすい水平部分

身体を支えやすい水平部分

安心して上り降りできる ゆったり曲線の設計

あがりカマチ




### ● 安心設計



にぎりやすい だ円形手すりです。

水平部分が長く安心。上り降りが楽々できます。

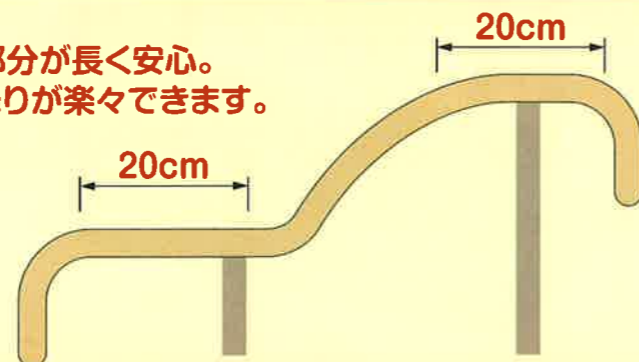

## 玄関にビス等で傷を付けない独自の固定方式

### ● ゆったり手すりは独自の固定方式でカンタンに取り付けできます。

取付例



玄関の広さに合わせ調節ができ、あがりカマチの幅が100cm~200cmまで、高さが15cm~40cmまで取り付けできます。手すりの高さは身長に合わせて66cm~78cmまで6段階に調整できます。

#### 専用固定バー



簡単で素早く取り付けできます。左右の壁にしっかりと固定でき、安心してご使用になれます。

#### 踏み台



玄関の高さに合わせ踏み台も高さが調整できます。踏み台の高さは12cm~約20cmまで4段階に調整できます。

※高さ固定の踏み台も用意しております。固定の踏み台は12cm。  
※踏み台の幅は45cmと60cmの2種類あります。

### 玄関の広さに合わせ 片側手すり、両側手すりとも 品種が豊富です。

※片側手すりの場合は、踏み台付となります。  
※片側手すり、両側手すりとも手すりの幅は45cmと60cmの2種類あります。

片側手すり



両側手すり

